

Mi Intelligente Elektrische Zahnbürste T500

Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

Beim ersten Gebrauch der Zahnbürste kann es zu Jucken oder leichtem Zahnfleischbluten kommen. Dies ist normal, wenn das Zahnfleisch nicht an die wirksame Reinigung mit einer elektrischen Zahnbürste gewöhnt ist. Wenn Ihr Zahnfleisch noch nicht daran gewöhnt ist, empfehlen wir Ihnen, den benutzerdefinierten Modus zu verwenden. Normalerweise hört Zahnfleischbluten innerhalb von ein bis zwei Wochen auf. Unterbrechen Sie den Gebrauch der Zahnbürste und wenden Sie sich an einen Zahnarzt, wenn das Bluten nicht aufhört.

⚠️ Warnung

- Benutzer, die sich einer kieferorthopädischen Behandlung unterziehen, oder Benutzer, die Zahnreparaturen oder Implantate haben, sollten sich vor der Verwendung dieser Zahnbürste an ihren Zahnarzt oder Kieferorthopäden wenden.
- Diese Zahnbürste entspricht den Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Falls Sie Fragen zur Verwendung des Geräts in Kombination mit Herzschrittmachern oder anderen implantierten Geräten haben, wenden Sie sich bitte vor dem Gebrauch an einen Arzt oder den Hersteller des implantierten Geräts.
- Diese Zahnbürste wurde eigens für die Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge entwickelt. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke. Bei Beschwerden oder Schmerzen hören Sie auf, die Zahnbürste zu benutzen und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
- Tauchen Sie die Ladestation nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Stecken Sie die Ladestation nicht in eine Steckdose, wenn der Stecker nass ist.
- Diese Zahnbürste arbeitet mit einem eingebauten wiederaufladbaren Akku und sie darf niemals Feuer ausgesetzt, oder in einer Hochtemperaturumgebung geladen, verwendet oder gelagert werden.
- Die Zahnbürste darf nicht gestoßen oder fallen gelassen werden. Wenn sie durch Stöße oder Stürze beschädigt wurde, hören Sie auf, sie zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, die Zahnbürste selber zu ändern, zu zerlegen oder zu reparieren.

⚠️ Vorsichtsmaßnahmen

- Vor Gebrauch der Zahnbürste auf offensichtliche Schäden prüfen. Verwenden Sie sie nicht, wenn sie stark beschädigt ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihres Stromnetzes mit der Nennspannung des Stromadapters der Zahnbürste übereinstimmt, bevor Sie ihn anschließen.
- Die Ladestation darf nicht im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden.
- Die Zahnbürste darf nicht beim Baden oder Duschen verwendet werden.
- Teilen Sie den Bürstenkopf nicht mit anderen Personen.
- Wickeln Sie das Stromkabel nicht um die Ladestation, während sie an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie keine Metallgegenstände auf die Ladestation, während sie an eine Steckdose angeschlossen ist.

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Schnittstelle in der Bedienungsanleitung dienen nur der Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.




Hiermit erklärt SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd., dass die Funkanlagen vom Typ MES601 die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.



Produktübersicht


Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die spätere Verwendung auf.

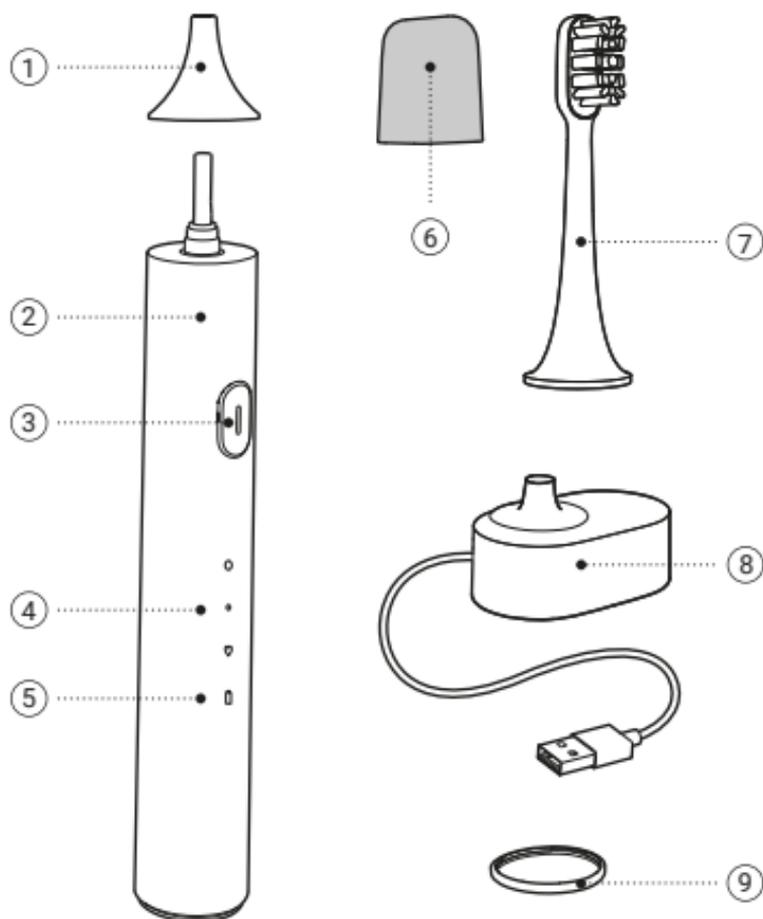


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ① Wellenschutzabdeckung | ⑤ Bluetooth/Akkulades tandsanzeige |
| ② Zahnbürstengriff | ⑥ Bürstenkopfabdeckung |
| ③ Ein-/Aus-Schalter | ⑦ Bürstenkopf |
| ④ Modusanzeige | ⑧ Ladestation |
| • Standardmodus | ⑨ Farbring (leicht zu unterscheiden) |
| • Sanfter Modus | |
| • Benutzerdefinierter Modus | |

Wie zu verwenden

1. Achten Sie darauf, dass der Bürstenkopf in die Richtung der Vorderseite des Zahnbürstengriffs montiert wird, und stellen Sie sicher, dass ein kleiner Spalt zwischen dem Bürstenkopf und dem Griff bleibt. Der Spalt ist erforderlich, um bei hochfrequenten Schwingungen einen Zusammenstoß des Bürstenkopfes mit dem Griff zu vermeiden und so mehr Leistung aus dem Motor zu beziehen.

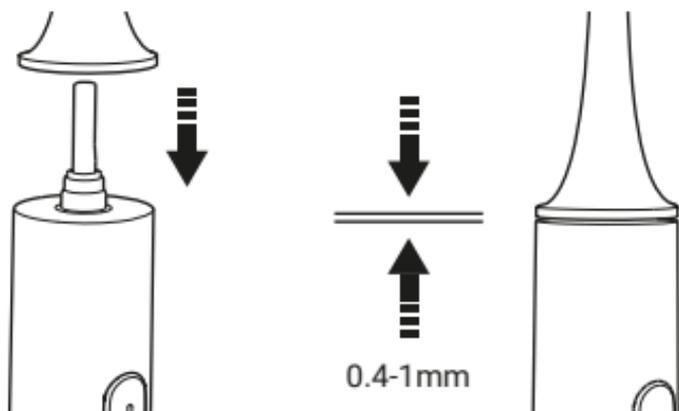

2. Feuchten Sie den Bürstenkopf an und drücken Sie eine ausreichende Menge Zahnpasta auf den Bürstenkopf.

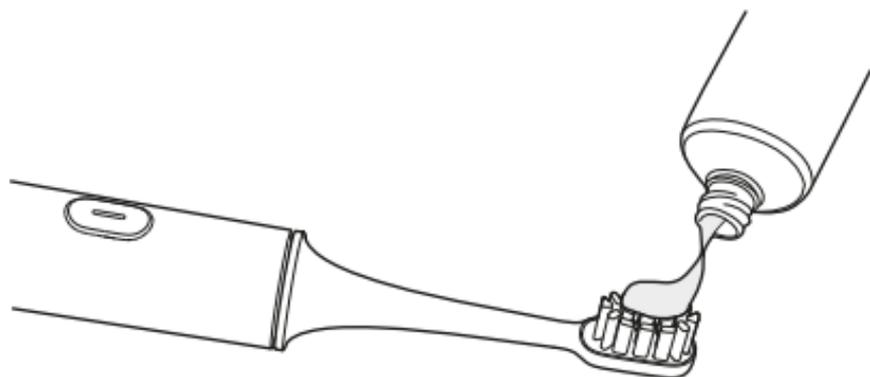

3. Ein-/Ausschalten/Umschalten der Modi



Einschalten: Drücken Sie die Taste, um die Zahnbürste einzuschalten.

Umschalten der Modi: Drücken Sie die Taste binnen 10 Sekunden nach dem Einschalten der Zahnbürste.

Pause: Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um eine Pause einzulegen, die Zahnbürste schaltet sich automatisch aus, nachdem sie 30 Sekunden lang inaktiv war.


Ausschalten: Drücken Sie die Taste einmal, um sie im  Benutzer-Modus innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Zahnbürste auszuschalten.

Wenn Ihre Zahnbürste schon länger als 10 Sekunden läuft, drücken Sie einfach die Taste, um sie auszuschalten.

Hinweis: Halten Sie die Taste 12 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte synchronisieren Sie Ihre Daten mit der App, um bei der Wiederherstellung der Werkseinstellungen einen Datenverlust zu vermeiden.

4. Gesundes Bürsten

- Halten Sie den Bürstenkopf in einem Winkel von 45° zum Zahnfleischrand und bewegen Sie ihn langsam entlang der Zähne und des Zahnfleischrands.
- Drücken Sie während des Bürstens die Ein-/Aus-Taste, um den Bürstenmodus zu wechseln.
- Während des Bürstens unterbricht die Zahnbürste alle 30 Sekunden kurz, um den Benutzer zum Ändern der Bürstenposition anzuregen.
- Wenn es während des Gebrauchs keine aktive Pause gibt, schaltet sich die Zahnbürste nach Beendigung des Bürstenmodus automatisch aus (der Bürstenmodus kann über die App eingestellt werden).

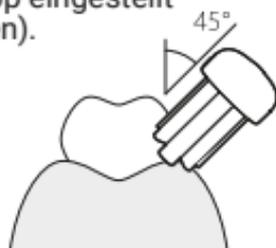

- Die Zahnbürste ist mit einem Überdruckschutz ausgestattet, der den Druck in Echtzeit erfasst. Wenn Sie beim Zähneputzen zu stark drücken, blinkt die Batteriestandsanzeige schnell rot, und die Zahnbürste reduziert automatisch die Intensität.

- Es gibt drei Bürstmodi:

Standardmodus: Geeignet für die tägliche Mundpflege

Sanfter Modus: Geeignet für empfindliche Zähne

Benutzerdefinierter Modus: Ein 2-Minuten Anfängermodus als Standard. Sie können die Einstellungen und die Dauer des Bürsten über die Mi Home/Xiaomi Home* anpassen.* Die App nennt sich Xiaomi Home in Europa (außer Russland). Der Name der auf Ihrem Gerät angezeigten App sollte als Standard übernommen werden.


5. Reinigung des Bürstenkopfes

- Nach dem Bürsten spülen Sie den Bürstenkopf unter fließendem Wasser ab.
- Stecken Sie die Schutzabdeckung nach dem Abspülen auf den Bürstenkopf, um ihn sauber und hygienisch zu halten.




- * Zahnärzte empfehlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszutauschen.

6. Diese Zahnbürste wird mit 3 Farbringen (grau, blau, grün) geliefert, die Sie nach Ihren Wünschen austauschen können.

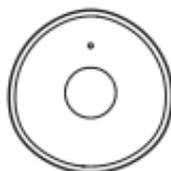

Darstellung der korrekten Ausrichtung des Farbringes

- Fassen Sie die Zahnbürste auf den Kopf gestellt mit einer Hand und verwenden Sie einen Fingernagel der anderen Hand, um den Farbring zu entfernen.
- Richten Sie die Dreiecksform auf dem Farbring (wobei die Stifte auf der Innenseite des Rings nach unten zeigen) mit dem dreieckigen Boden des Zahnbürstengriffs aus und drücken Sie ihn fest.

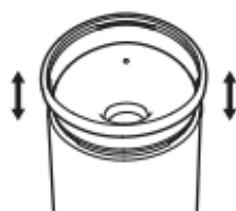


Siehe Abbildung



Intelligente Funktionen

1. Die Zahnbürste ist mit einem Überdruckschutz ausgestattet, der den Druck in Echtzeit erfasst. Wenn Sie beim Zähneputzen zu stark drücken, blinkt die Batteriestandsanzeige schnell rot, und die Zahnbürste reduziert automatisch die Intensität. Beim Zähneputzen: Die Batteriezustandsanzeige blinkt schnell rot, wenn zu viel Druck ausgeübt wird.

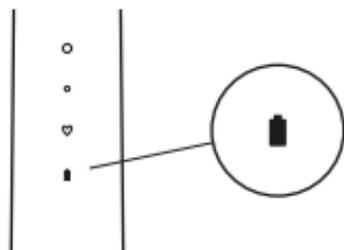

During teeth brushing: The battery level indicator will quickly blink red when using too much pressure.

2. Sie können die Bürstendauer, den Modus und den Spritzschutz über die Mi Home/Xiaomi Home einstellen. Nach dem Bürsten können Sie die Daten einsehen und einen Bericht erstellen.
 - Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden
 - Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App.

- Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.
- (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.



- Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Umweltschutz

Wenn die Zahnbürste das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, muss der eingebaute Akku entfernt, entsorgt und in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in dem sie verwendet wird, recycelt werden.


Technische Daten

Name: Mi Intelligente Elektrische Zahnbürste T500	
Nennspannung: 3,7 V \equiv	Model: MES601
Betriebsspannung: 5 V \equiv 0,5 A	Nennleistung: 2 W
Akkukapazität: 700 mAh	Ladedauer: 12 Stunden
Frequenzbereiche: 2.402 – 2.480 MHz	Schutzgrad: IPX7
Maximale Ausgangsleistung: 0 dBm	
Abmessungen des Bürstenkopfes: 24,6 x 24,6 x 85,0 mm	
Abmessungen des Zahnbürstengriffs: 28,1 x 28,3 x 187,5 mm	

Laden

Status der Zahnbürste	Akkuladezustandsanzeige	Status	Akkuladung
Verwendung	Cyan		100%-60%
	Orange		60%-20%
	Rot		20%-10%
	Schnell blinkendes Rot (Die Zahnbürste kann nicht eingeschaltet werden)		<10%
Aufladen	Cyan		100%
	Langsam blinkendes Cyan		100%-60%
	Langsam blinkendes Orange		60%-20%
	Langsam blinkendes Rot		<20%

- Die Ladestation der Zahnbürste ist für die T500 ausgelegt und kann nicht mit anderen Produkten verwendet werden.
- Wenn der Akkuladezustand niedrig ist, blinkt die Anzeige schnell rot und die Zahnbürste kann nicht eingeschaltet werden. Das vollständige Aufladen der Zahnbürste dauert etwa 10 bis 16 Stunden.
- Während die Zahnbürste aufgeladen wird, blinkt die Akkuladeanzeige dreimal blau, wenn Sie sie mit der App verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung bleibt die Anzeige der Zahnbürste blau. Die Verbindung zur App wird nach Abschluss der Synchronisation automatisch getrennt, und die Anzeige der Zahnbürste zeigt den aktuellen Akkuladezustand an. Falls die Zahnbürste nicht mit der App verbunden ist, bleibt die Anzeige unverändert, d.h. sie zeigt den aktuellen Akkuladezustand an.

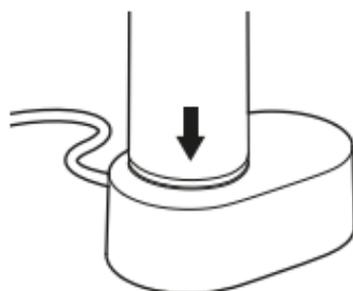

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Gerät kann nicht durch Drücken der Taste eingeschaltet werden.	Laden	Entfernen Sie die Zahnbürste von der Ladestation
	Bluetooth ist verbunden	Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons
	Der Akkuladestand ist zu niedrig	Stellen Sie die Zahnbürste auf die Ladestation, um sie aufzuladen
Der Bürstenkopf kann nicht auf die Welle montiert werden.	Etwas steckt im Bürstenkopf fest	Benutzen Sie ein Werkzeug, um den Fremdkörper vom Bürstenkopf zu entfernen
	Etwas steckt auf der Welle fest	Reinigen Sie die Welle
	Kein Original-Bürstenkopf	Ersetzen Sie ihn durch einen Original-Bürstenkopf
Übermäßiger Stromverbrauch und häufiges Aufladen	Lange Zeit über Bluetooth mit dem Telefon gekoppelt	Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn Sie die Zahnbürste nicht verwenden
	Zu häufig verwendet	Stellen Sie die Zahnbürste auf die Ladestation, um sie aufzuladen
Die Vibration des Bürstenkopfes ist schwach	Der Bürstenkopf ist nicht richtig installiert	Bringen Sie den Bürstenkopf wieder an
	Irgendetwas steckt zwischen dem Bürstenkopf und dem Griff fest	Entfernen Sie den Bürstenkopf und entfernen Sie den Fremdkörper
Verbindung zur App nicht möglich	Das Bluetooth Ihres Telefons ist nicht aktiviert	Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Handys und steuern Sie es über die Mi Home /Xiaomi Home
	Die Zahnbürste ist zu weit vom Telefon entfernt	Legen Sie das Telefon in die Nähe der Zahnbürste
	Die Zahnbürste vibriert	Schalten Sie die Zahnbürste aus und versuchen Sie, sie wieder anzuschließen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Manufactured by: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

(Ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Adresse: Room 201, Block A, No.1 Qianwan 1st Rd, Qianhai Shenzhen
-Hongkong Cooperation Zone, Shenzhen, China

Importeur:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.berkyo.cz